


MANUALE DI ISTRUZIONI

Rifrattometro Milwaukee



■ MA886

Rifrattometro digitale
per misurazioni di Cloruro di Sodio

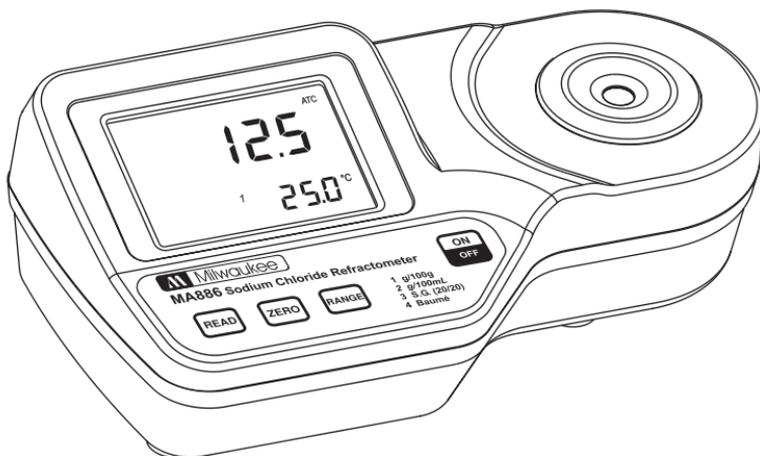

 Milwaukee

www.milwaukeeinst.com

INDICE

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI	3
DESCRIZIONE GENERALE	5
SPECIFICHE	6
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO	6
AVVERTENZE	8
PROCEDURA DI CALIBRAZIONE	8
PROCEDURA DI MISURAZIONE	10
CAMBIO DELLA UNITA' DI MISURAZIONE	11
CAMBIO DELL'UNITA' DI MISURA DELLA TEMPERATURA	11
PRAPARAZIONE DI UNA SOLUZIONE DI CLORURO DI SODIO STANDARD	12
MESSAGGI DI ERRORE	13
SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA	14
GARANZIA	15


Rimuovere lo strumento dall'imballaggio ed esaminarlo attentamente per assicurarsi che non abbia subito danni durante il trasporto. Se si notano dei danni, informare immediatamente il rivenditore.

Ogni rifrattometro MA886 viene fornito con una batteria 9 V e manuale di istruzione.

Nota: conservare tutto il materiale fino a che non si sia sicuri del corretto funzionamento dello strumento. Qualsiasi prodotto difettoso deve essere restituito completo di tutte le sue parti e nell'imballo originale.


DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

DISPLAY

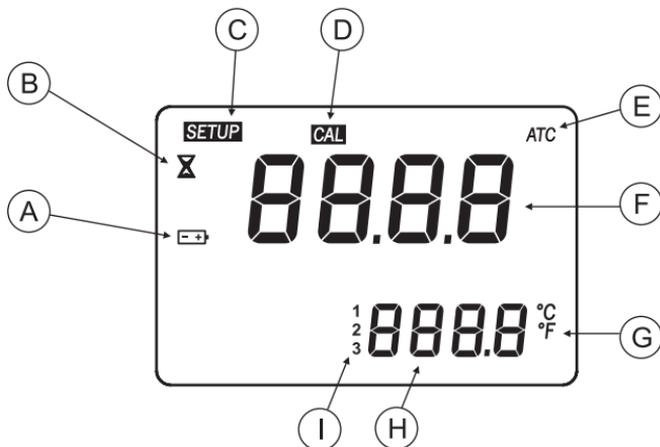


- A. SIMBOLO DI BATTERIA: LAMPEGGIA QUANDO LA BATTERIA SI STA SCARICANDO
- B. SIMBOLO DI CLESSIDRA: INDICA CHE LO STRUMENTO STA MISURANDO
- C. SET UP: INDICA LA CALIBRAZIONE DI FABBRICA
- D. CAL: INDICA MODALITÀ DI CALIBRAZIONE
- E. ATC (COMPENSAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURA): LAMPEGGIA QUANDO LA TEMPERATURA È AL DI FUORI DELL'INTERVALLO 10-40°C.
- F. LIVELLO PRINCIPALE DEL DISPLAY (MOSTRA MESSAGGI DI ERRORE E DI MISURAZIONE)
- G. UNITÀ DI MISURA DELLA TEMPERATURA
- H. LIVELLO SECONDARIO DEL DISPLAY. UTILIZZATO PER VISUALIZZARE LA MISURA LA MISURA DELLA TEMPERATURA (LAMPEGGIANTE QUANDO È FUORI SCALA 0-80°C)
- I. INDICATORE DELLA SCALA DI MISURAZIONE

PANNELLO FRONTALE

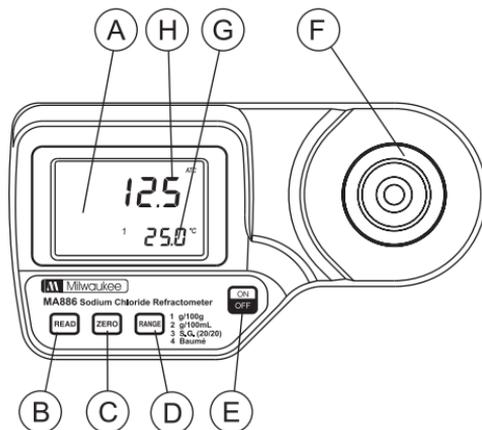

- A. DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI (PCD)
- B. TASTO READ, PER ESEGUIRE LA MISURA
- C. TASTO ZERO, PER CALIBRARE
- D. TASTO SCALA DI MISURAZIONE
- E. ON/OFF, PER ACCENDERE E SPEGNERE LO STRUMENTO
- F. CELLA DI MISURA IN ACCIAIO INOX E PRISMA
- G. DISPLAY SECONDARIO
- H. DISPLAY PRIMARIO

PARTE INFERIORE

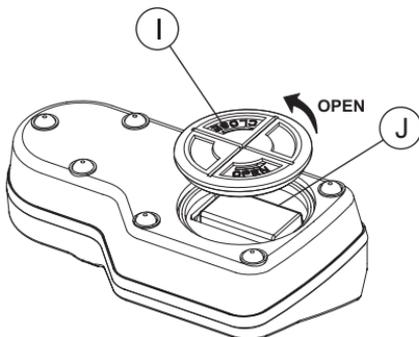

- I. COPERCHIO DEL VANO BATTERIA
- J. VANO BATTERIA

DESCRIZIONE GENERALE

Grazie per avere scelto Milwaukee. Questo manuale d'istruzione, Le darà tutte le informazioni necessarie per un uso corretto dello strumento.

Il rifrattometro digitale **MA886** è uno strumento ottico basato sulla misurazione dell'indice di rifrazione di una soluzione acquosa, per determinarne la concentrazione di Cloruro di Sodio. Usato per preparazioni alimentari non è da usarsi per misurazioni di salinità di acqua marina.

La misurazione dell'indice di rifrazione è semplice e rapido e fornisce un metodo riconosciuto per l'analisi del contenuto di cloruro di Sodio. Dopo aver eseguito una semplice e rapida calibrazione con acqua distillata o deionizzata, lo strumento misura in pochi secondi l'indice di rifrazione del campione.

Il rifrattometro digitale elimina qualsiasi incertezza associata ai rifrattometri meccanici e si può agevolmente trasportare per eseguire misure sul campo.

Il rifrattometro Milwaukee **MA886** impiega riferimenti internazionali riconosciuti per la conversione in unità e per la compensazione della temperatura. Può mostrare la concentrazione di Cloruro di Sodio (NaCl) in quattro differenti unità di misura: g/100g, g/100 mL, Gravità Specifiche e in °Baumé.

La temperatura (in °C e °F) viene visualizzata simultaneamente con la misura (con 3 delle scale di misurazione) sull'ampio display a due livelli. Vengono inoltre visualizzati utili messaggi, icone e l'indicazione di batteria in fase di esaurimento.

Caratteristiche salienti:

- Modelli con grado di protezione IP65
- Compensazione automatica della temperatura (ATC)
- Alimentazione a batteria, con l'indicazione di basso livello e sistema BEPS (per evitare errori di misura dovuti a batteria quasi scarica)
- Spegnimento automatico dopo 3 minuti di inattività.

SPECIFICHE

	g/100 g	g/100 mL	Gravità Specifica	°Baumé	°C (°F)
Scala	0 a 28	0 a 34	1.000 a 1.216	0 a 26	0 a 80 °C (32 a 176 °F)
Risoluzione	0.1	0.1	0.001	0.1	0.1 °C (0.1 °F)
Accuratezza	±0.2	±0.2	±0.002	±0.2	±0.3 °C (±0.5 °F)

SPECIFICHE COMUNI

Sorgente luminosa	LED giallo
Tempo di misura	Circa 1.5 secondi
Volume minimo del campione	100 microlitri (deve coprire completamente il prisma)
Cella di misura	Anello in acciaio inox e prisma in vetro flint
Compensazione	Automatica, da 10 a 40°C
Temperatura	
Materiale del corpo	ABS
Grado di protezione	IP 65
Alimentazione	1 batteria da 9 V / circa 5000 letture
Spegnimento automatico	Dopo 3 minuti di inattività
Dimensioni	192 x 102 x 67 mm
Peso	420 grammi

PRINCIPIO DELLE OPERAZIONI


La determinazione di NaCl in soluzioni acquose vengono effettuate misurando l'indice di rifrazione della soluzione. L'indice di rifrazione infatti è una proprietà ottica caratteristica di una sostanza e del numero di particelle in essa disciolte.

Viene definito come il rapporto tra la velocità delle luce in uno spazio libero e la velocità della luce nella sostanza. Il risultato di questa proprietà è che la luce cambia direzione quando passa attraverso sostanze con diversi indici di rifrazione. Questo fenomeno è detto rifrazione.


Quando la luce passa da un materiale con un certo indice di rifrazione ad uno con un indice di rifrazione minore, esiste un angolo critico oltre il quale un fascio di luce incidente non può più essere rifratto, ma viene invece riflesso. Tale angolo critico può essere usato per calcolare l'indice di rifrazione secondo l'equazione:

$$\sin(\theta_{\text{critico}}) = n_2 / n_1$$

Dove n_2 è l'indice di rifrazione del mezzo a densità minore; n_1 è l'indice di rifrazione del mezzo a densità maggiore.

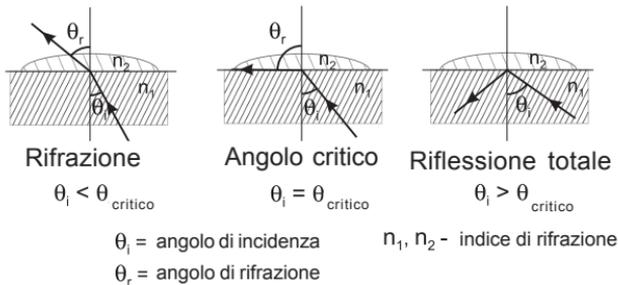

Nel rifrattometro **MA886**, la luce proveniente dal LED passa attraverso un prisma a contatto con il campione. Un sensore di immagine determina l'angolo critico oltre il quale la luce non viene più rifratta attraverso il campione.

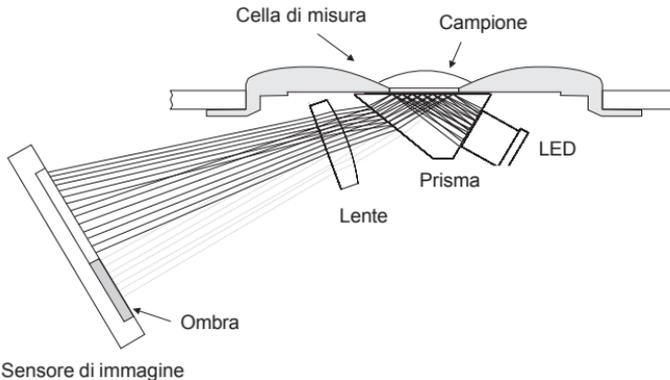

Particolari algoritmi poi applicano la compensazione della temperatura alla misurazione e convertono l'indice di rifrazione in: g/100 g (% in peso), g/100 mL, gravità specifiche (S.G. 20/20) o in Baumé.

AVVERTENZE

- Maneggiare lo strumento con attenzione. Non farlo cadere.
- Non immergere lo strumento in acqua.
- Non spruzzare acqua sullo strumento, ad eccezione della cella di misura posizionata sopra al prisma.
- Lo strumento è stato progettato per misurare soluzioni di mosto o vino. Non esporre il rifrattometro o il prisma a solventi che potrebbero danneggiarli, come la maggior parte dei solventi organici e soluzioni estremamente calde o fredde.
- Eventuali particelle presenti nel campione potrebbero graffiare il prisma. Per togliere il campione dalla cella di misura, assorbirlo con un tessuto morbido. Quindi sciacquare la cella con acqua distillata o deionizzata.
- Usare pipette in plastica per trasferire le soluzioni. Non usare strumenti in metallo, come per esempio aghi, cucchiaini o pinzette, perché potrebbero graffiare il prisma.


PROCEDURA DI CALIBRAZIONE

Lo strumento dovrebbe essere calibrato ogni giorno prima di iniziare le misure, ogni volta che viene sostituita la batteria, durante una lunga serie di misure o quando le condizioni ambientali sono variate dall'ultima calibrazione.

1. Premere il tasto ON/OFF per accendere lo strumento. Il display mostrerà per alcuni secondi due schermate di test, quindi la percentuale di carica residua della batteria.



2. Utilizzando una pipetta in plastica, riempire la cella di misura con acqua distillata o deionizzata. Assicurarsi che la cella di misura sia completamente coperta.

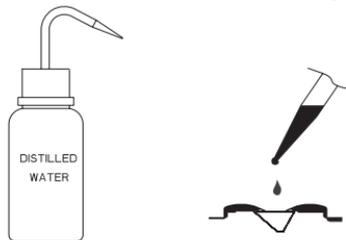

Nota: Se lo strumento è sottoposto a luce intensa, come ad esempio alla luce del sole o un'altra sorgente forte, durante la calibrazione coprire la cella di misura con una mano o un'altra protezione

3. Premere il tasto ZERO. Se non compare alcun messaggio di errore, lo strumento è calibrato. Per la descrizione di possibili messaggi di errore, vedere la corrispondente sezione alla pagina 13.

Nota: La schermata 0.0 rimane fino a quando viene eseguita la misura di un campione o lo strumento viene spento.



4. Assorbire delicatamente l'acqua dalla cella di misura utilizzata per la misura dello zero, usando un tessuto morbido. Pulire bene la superficie del prisma, facendo attenzione a non graffiarla. A questo punto lo strumento è pronto per misurare.



Nota: Lo strumento mantiene la calibrazione anche se viene spento.

PROCEDURA DI MISURAZIONE

Prima di effettuare una misurazione, controllare che lo strumento sia stato calibrato

1. Pulire la superficie del prisma all'interno della cella di misura. Ed assicurarsi che la cella di misura sia completamente asciutta.





2. Usando una pipetta in plastica far gocciolare il campione sulla superficie del prisma. Riempire completamente la cella di misura.



Nota: Se la temperatura del campione differisce in maniera significativa da quella dello strumento, attendere circa un minuto per raggiungere l'equilibrio.

3. Premere il tasto READ. La misura viene visualizzata sul display in accordo all'unità di misura selezionata.

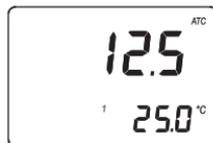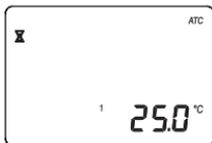

Nota: L'ultimo valore misurato rimane sul display fino a quando si esegue un'altra misurazione o lo strumento viene spento. La temperatura viene continuamente aggiornata.

Nota: L'indicazione ATC lampeggia sul display e la compensazione automatica della temperatura è disabilitata, se la temperatura è al di fuori dell'intervallo da +10 a +40°C.




4. Rimuovere il campione dalla cella di misura assorbendolo con un tessuto morbido.
5. Usando una pipetta in plastica, sciacquare prisma e cella con acqua distillata o deionizzata, quindi asciugare. Lo strumento è pronto per il campione seguente.



VARIAZIONE DELL'UNITA' DI MISURA

Premere il tasto RANGE per selezionare l'unità di misurazione tra le quattro scale disponibili. Lo strumento si sposta da una scala all'altra ogni volta che il tasto è premuto e il display primario indica "G-G" per g/100 g, "G-L" per g/100 ml, "S.G." per le gravità specifiche e "bAU" per Baumé. Quando lo strumento mostra il display con 4 linee, è pronto per le misurazioni. Un numero sul display indica l'unità di misurazione selezionata: "1" indica g/100 g, "2" indica g/100 mL, "3" indicale gravità specifiche e "4" indica i °Baumè., come indicato sulla mascherina dello strumento.

Nota: La temperatura non viene mostrata se si è nella scala Baumè.

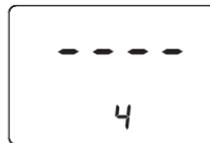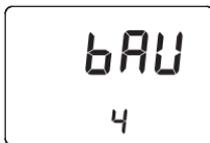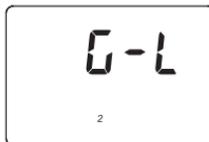


VARIAZIONE DELL'UNITA' DI MISURA DELLA TEMPERATURA

Lo strumento può visualizzare la temperatura in gradi Celsius (°C) o Fahrenheit (°F). Per cambiare unità di misura, procedere in questo modo:

1. Premere e tenere premuto il tasto ON/OFF per circa 8 secondi. Comparirà prima una schermata completa e poi una schermata con indicazioni riguardanti lo strumento (modello, sul display primario e numero della versione sul display secondario). Continuare a premere il tasto.



8 secondi

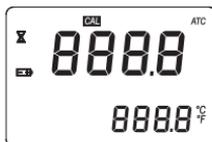

2. Continuando a tener premuto il tasto ON/OFF, premere il tasto ZERO. L'unità di misura della temperatura cambierà da °C a °F o viceversa.



°C or °F

PREPARAZIONE DI UNA SOLUZIONE STANDARD DI CLORURO DI SODIO

Per preparare una soluzione standard di Cloruro di Sodio, procedere come segue:

- Posizionare un contenitore (per esempio una beuta in vetro o una bottiglia con tappo) su una bilancia analitica.
- Tarare la bilancia.
- Per preparare una soluzione "X" di Cloruro di Sodio, pesare X grammi di Cloruro di Sodio (CAS #: 76447-14-5) direttamente nel contenitore.
- Aggiungere acqua distillata o deionizzata in modo tale che il peso totale della soluzione sia di 100 grammi.

Esempio di una soluzione 25% Brix:

g/100 g NaCl

10

g NaCl

10,000

g Acqua

90,000

g Totale

100,000

MESSAGGI DI ERRORE

Codice di errore		Descrizione
Err		Errore generico. Spegner e riaccendere lo strumento. Se il problema persiste, contattare l'assistenza Milwaukee
LO (low)		Lo strumento sta leggendo un campione con valore % Brix inferiore allo zero di riferimento (calibrazione)
HI (high)		La lettura è fuori scala (maggiore del massimo di lettura dello strumento)
LO (low) + CAL		Errore di calibrazione. Usare acqua distillata o deionizzata e premere ZERO
HI (high) + CAL		Errore di calibrazione. Usare acqua distillata o deionizzata e premere ZERO
tLO + CAL		Durante la calibrazione la temperatura è inferiore al limite minimo (+10°C) per la compensazione
tHI + CAL		Durante la calibrazione la temperatura è superiore al limite massimo (+40°C) per la compensazione
Air		La superficie del prisma non è sufficientemente coperta dalla soluzione da misurare
ELt		Un eccesso di luce esterna interferisce con la misura. Coprire la cella con una mano
nLt		Assenza di luce. Il LED non funziona. Contattare l'assistenza Milwaukee
Simbolo di batteria lampeggiante		La batteria si sta esaurendo; carica < 5%
Valore di temperatura lampeggiante, min o max		La misura di temperatura è fuori scala (da 0 a +80°C)
Simbolo ATC lampeggiante		Temperatura al di fuori dell'intervallo di compensazione (da 0 a +40°C)
Simbolo SETUP lampeggiante		Lo strumento ha perso la calibrazione di fabbrica. Contattare l'assistenza Milwaukee

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA


Quando la carica della batteria è minore del 5%, il simbolo di batteria lampeggia sul display per avvisare l'utente che la batteria deve essere sostituita quanto prima. Inoltre lo strumento è dotato del sistema PEPS (Battery Error Prevention System), che lo spegne automaticamente quando il livello della batteria è troppo basso per assicurare letture affidabili.

Per sostituire la batteria, procedere come segue:

- Spegnere lo strumento premendo il tasto ON/OFF.



- Togliere il coperchio del vano batteria (vedi figura) facendolo ruotare in senso antiorario.

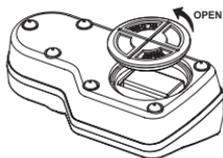

- Estrarre la batteria scarica e inserirne una nuova da 9 V, controllando la corretta polarità.
- Reinserrire il coperchio e chiuderlo facendolo girare in senso orario.

Per questioni di sicurezza, non utilizzare lo strumento in ambienti pericolosi. Per evitare danni o bruciature, non effettuare misurazioni all'interno di forni a microonde.

GARANZIA

Il rifrattometro **MA886** è garantito per due anni contro difetti dei materiali o di fabbricazione, se vengono utilizzati per il loro scopo e secondo le istruzioni riportate nel manuale d'uso.

Milwaukee declina ogni responsabilità per danni accidentali a persone o cose dovuti a negligenza o manomissioni da parte dell'utente, o a mancata manutenzione prescritta, o causati da rotture o malfunzionamento. La garanzia copre unicamente la riparazione o la sostituzione dello strumento, qualora il danno non sia imputabile a negligenza o ad un uso errato da parte dell'operatore.

Milwaukee/Martini Instruments si riserva il diritto di modificare, migliorare il disegno, la costruzione e l'aspetto dei propri prodotti senza preavviso.

GRAZIE PER AVER SCELTO



Contatti per assistenza tecnica e vendita:

Milwaukee Electronics Kft.
Alsóikikötő sor 11.
6726, Szeged, Hungary
Tel: +36-62-428-050
Fax: +36-62-428-051
e-mail: sales@milwaukeeinst.com

Milwaukee Instruments, Inc.
2950 Business Park Drive Rocky Mount, NC
27804 USA
Tel: +1 252 443 3630
Fax: +1 252 443 1937
e-mail: sales@milwaukeetesters.com

www.milwaukeeinst.com